



VeHu
SALES & PRODUCTION

VETERINÄR

**WILLKOMMEN BEI VEHU
SIE KENNEN UNS (NOCH) NICHT?**

Wir sind ihr kompetenter Partner für die Veterinär- und Humanmedizin.

Denn wir bieten das komplette Programm an chirurgischen Instrumenten direkt aus Tuttlingen - dem weltzentrum der Medizintechnik.

Neben dem Vertrieb konzentrieren wir uns auf unsere Produktionsstätte –MRitter&Sohn GmbH in der wir hochpräzise chirurgische Instrumente entwickeln und fertigen – selbstverständlich auch kundenspezifische Aufträge.

Sowohl die Produkte aus unserer eigenen Herstellung und die Komponenten von ausgewählten Lieferanten, obliegen konsequent unserer strengen Kontrolle, Prüfverfahren und langjähriger Erfahrung.

So wird die gleichbleibende hohe Qualität aus unserem Hause gesichert und bereitgestellt. Für die hohe Anforderung in der Medizin.

**WELCOME TO VEHU.
YOU DON'T KNOW US YET.**

We are your competent partner for veterinary and human medicine.

We offer the entire range of surgical Instruments. Our headquarter is located in Tuttlingen, the world center of medical technology.

In addition to sales, we concentrate on our production site- MRitter&Sohn GmbH-in which we develop and manufacture high-precision surgical instruments- Of course, also custom orders.

Both the products of our own production and the components of selected suppliers are consistently subject to our strict control, testing procedures and many years of experience.

This way the constant high quality from our company is secured and made available. For the high requirement in the medicin



EINLEITUNG INTRODUCTION

VeHu-Medical ist seit 2000 erfolgreich im medizinischen Bereich tätig. Wir bieten das komplette Sortiment chirurgischer Instrumente an. VeHu-Medical wurde ursprünglich im Jahr 2000 gegründet und wechselte 2015 zu MRitter & Sohn, einem etablierten Hersteller von chirurgischen Instrumenten. Der mittlerweile über zwei Generationen von Michael Ritter und Kevin Ritter geführt wird. Michael Ritter, der seine über drei Jahrzehnte lange Erfahrung in der Herstellung von chirurgischen Instrumenten einbringt und nach höchsten Qualitätsstandards herstellt. Die allen nationalen und internationalen Normen und Vorschriften entsprechen. Auch im Vertrieb, steht unsere Philosophie und Marke für herausragende Qualität. Einen Kundenservice mit persönlicher Beratung und zuverlässigen Service gewährleistet.

Das Produkt und die Erwartungen unserer Kunden stehen im Mittelpunkt und Fokus aller unserer Aktivitäten, um die Erwartungen, Wünsche und Anforderungen unserer Kunden auf höchstem Qualitätsniveau zu erfüllen. Unsere Datenbank umfasst 15.000 Standardartikel. Obwohl unser Lagerbestand in den letzten zwei Jahren verdoppelt wurde, fügen wir unserer Standardbestandsmenge kontinuierlich weitere Artikel hinzu, um die kürzeste Lieferzeit für unsere Kunden sicherzustellen. Unser Logistiksystem wurde an den neusten Stand der Technik angepasst und verfügt über eine geschulte Mitarbeiterzahl von mehr als 10 Mitarbeitern im Vertrieb und in der eigenen Produktion, um die tägliche Einhaltung der Produktionsqualität und Lieferzeiten sicherzustellen.

All dies spiegelt sich in unserer Flexibilität und Verfügbarkeit für jeden Kundenwunsch in Verbindung mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis wider. Um die Einhaltung aller verbindlichen internationalen Standards zu gewährleisten, sind wir selbstverständlich ein nach DIN ISO 13485: 2016 und US-amerikanischen FDA zertifiziertes Unternehmen

Since 2000, VeHu-Medical has been successfully active in the medical sector. We offer a complete range of surgical instruments. VeHu-Medical was originally founded in the year 2000 and changed ownership in 2015 to MRitter & Sohn, a well established manufacturer of surgical instruments with the professional expertise of Michael Ritter and Kevin Ritter meanwhile over 2 generations of manufacturing surgical instruments of the highest quality standards complying with all national and international standards and regulations. After almost 2 decades of professional experience in manufacturing of surgical instruments, as well as the sales and distribution, our philosophy and brands stands for outstanding quality, a customer service with personal approach and advise and of course reliable on-time delivery are our strengths and ensure customer comprehensive and reliable service.

The product along with our customers expectations are the center and focus of all activities in order to meet our clients expectations, wishes, demands and requirements on the highest quality levels. Our database includes 15.000 standard articles and despite our stock value has been doubled over the last two years, we continuously adding more articles to our standard stock quantity to ensure the shortest possible delivery time for our clients. Our store and logistic system has been adapted to the last state-of-the-art requirements, along with a professional trained staff size of more then 10 employees in sales and own production to ensure production quality and delivery time compliance on daily bases.

All of the above is reflected by our flexibility and availability for any customer demand in combination with an excellent price-performance ratio. In order to ensure the compliance with all mandatory international standards we are, of course, a certified DIN ISO 13485:2016 and US FDA registered company



Catalog Number Prefix	Product Group	Page Number
	Introduction	2 - 3
	veterinary instruments	6 - 26
	Note	27




Wir behalten uns vor, Änderungen und Verbesserungen durchzuführen und die Instrumente und Geräte ohne besonderen Hinweis in der modifizierten Ausführung auszuliefern.

Die Verwendung dieses Kataloges zu anderen Zwecken als ausschließlich der zum Vertrieb von VeHu Produkten ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden rechtlich geahndet. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten.



We reserve the right of technical modifications and improvements and to supply the instruments and apparatus without specific indication in the modified finish.

The use of this catalogue is restricted to actions necessary for selling original VeHu products. The use for any purpose other than selling original VeHu products is prohibited and will be prosecuted. Reprinting, even partially, is not allowed

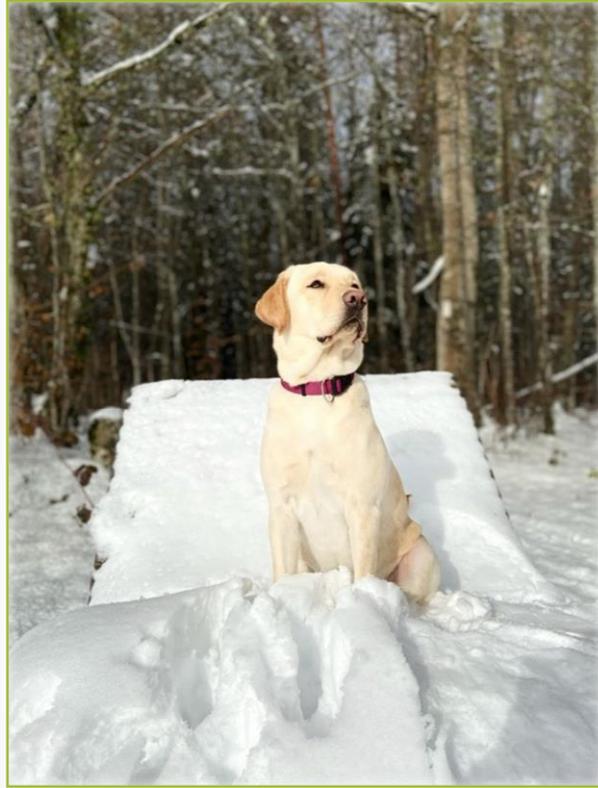



268.302.65

YEOMAN Biopsie forceps

65 cm withring handle

YEOMAN Biopsie Zange

65 cm mit Ringgriff



268.302.65FG

YEOMAN biopsy forceps

65cm withFerris-Shmith handle

YEOMEN Biopsie Zange

65 cm mit Ferris-ShmithGriff

268.302.01

Biopsy forceps

for small animals, 1mm cut
withring handle

Biopsie Zange

für Kleintiere, 1mm-Schnitt
mit Ringgriff



268.302.02

Biopsy forceps

for small animals, 2mm
cutwithring handle

Biopsie Zange

für Kleintiere, 2mm-Schnitt
mit Ringgriff





270.530.28

YOUNG grasping forceps

exchangeable rubber inserts
28 cm, can be dismantled

YOUNG Fasszange

auswechselbare Gummieinsätze
28 cm, zerlegbar

285.501.17

subgingival curette 17 cm

(Below the gum) The curette is used to clean plaque and tartar from the tooth root surface of the tooth



Subgingival Kürette 17 cm

(Unterhalb des Zahnfleisches) Die Kürette wird verwendet, um Plaque und Zahnstein von der Zahnwurzeloberfläche zu entfernen

285.501.16

Jaquette supragingival scaler 16,5 cm

(Above the gum) The scaler is used to remove plaque and tartar from the tooth surface. It works well in tight occlusal spaces.



Jaquette Supragingival Scaler 16,5 cm

(Über dem Zahnfleisch) Der Scaler wird verwendet, um Plaque und Zahnstein von der Zahnoberfläche zu entfernen. Es funktioniert gut in engen okklusalen Räumen.

285.501.18

Sickle Scaler 16,5 cm

This scaler is used to remove plaque and tartar from the tooth surface. The crescent scaler tip can be used to remove tartar from the developing and blood grooves of canines.



Sickel Scaler 16,5 cm

Dieser Scaler wird verwendet, um Plaque und Zahnstein von der Zahnoberfläche zu entfernen. Die Sichel-Scaler-Spitze kann verwendet werden, um Zahnstein aus den Entwicklungs- und Blutrillen von Eckzähnen zu entfernen.

284.501.20

Double Ended Periosteal Elevator 20,5 cm

The periosteal elevator is used to lift a muco-periosteal flap from bone during surgical extractions. The fine double-ended 2/4 periosteal elevator is ideal for cats and small to medium-sized dogs.



Doppelendiger Periosteal-Elevator 20,5 cm

Der Periosteal-Elevator wird verwendet, um bei chirurgischen Extraktionen einen muco-periostalen Lappen vom Knochen zu heben. Der feine doppelendige 2/4 Periosteal-Elevator ist ideal für Katzen und kleine bis mittelgroße Hunde.

284.501.22

Resorptive Lesion Probe 16,5 cm

This probe can be used to identify resorptive lesions or residual calculus subgingivally. The probe can also be used to identify furcation involvement (loss of alveolar bone between the tooth roots).



Sonde für resorptive Läsionen 16,5 cm

Mit dieser Sonde lassen sich resorptive Läsionen oder Reststein subgingival erkennen. Die Sonde kann auch verwendet werden, um eine Furkationsbeteiligung (Verlust von Alveolarknochen zwischen den Zahnwurzeln) zu identifizieren.

284.501.24

Sickle Scaler 16,5 cm

This double-sided hand instrument is used to remove supragingival (above the gums) plaque/tartar and discoloration



Sichel Scaler 16,5 cm

Dieses doppelseitige Handinstrument wird zur Entfernung von supragingivalem (über dem Zahnfleisch) Plaque/ Zahnstein und Verfärbungen verwendet

284.501.26

Very Fine Periosteal Elevator 20,5 cm

The small delicate flat ends of this instrument are ideal for lifting the gum flaps in cats. The rounded tip prevents accidental slipping and tearing of the gum flap.



Sehr feiner Periost-Elevator 20,5 cm

Die kleine zarte flache Enden dieses Instruments sind ideal zum Anheben der Zahnfleischlappen bei Katzen. Die abgerundete Spitze verhindert versehentliches Verrutschen und Reißen des Zahnfleischlappens.

284.503.01

Dental Probe

Length 40cm

Dental Sonde

Länge 40cm





284.503.10

Long Elevator

Length 30cm 6mm roundtip

Langer Elevator

Länge 30cm 6mm runde Spitze

284.503.20

Long Elevator

Length 30cm 6mm straighttip

Langer Elevator

Länge 30cm 6mm gerade Spitze

284.503.30

Long Elevator

Length 35cm 6mm straighttip

Langer Elevator

Länge 35cm 6mm gerade Spitze

284.503.50

Long Bent Elevator

Length 40cm 6mm roundtip

Langer gebogener Elevator

Länge 40cm 6mm runde Spitze

284.503.11

Long Elevator

Length 30cm 8mm roundtip

Langer Elevator

Länge 30cm 8mm runde Spitze

284.503.21

Long Elevator

Length 30cm 8mm straighttip

Langer Elevator

Länge 30cm 8mm gerade Spitze

284.503.31

Long Elevator

Length 35cm 8mm straighttip

Langer Elevator

Länge 35cm 8mm gerade Spitze

284.503.51

Long Bent Elevator

Length 40cm 8mm roundtip

Langer gebogener Elevator

Länge 40cm 8mm runde Spitze

284.501.30

IncisorLuxator19,5 cm

Used to assist in the extraction of rabbit incisors. The instrument is used to break up periodontal ligaments on the distal and medial sides of the incisors



Schneidezahn-Luxator19,5 cm

Wird verwendet, um die Extraktion von Kaninchen-Schneidezähnen zu unterstützen. Das Instrument wird verwendet, um parodontale Ligamente an der distalen und medialen Seite der Schneidezähne aufzubrechen

284.501.31

Molar Luxator18 cm

Designed for the extraction of rabbit cheek teeth. This instrument is used to break up periodontal ligaments on all four aspects of the premolars and molars.



Backenzahn Luxator18 cm

Entwickelt für die Extraktion von Kaninchenbackenzähnen. Dieses Instrument wird verwendet, um parodontale Ligamente an allen vier Aspekten der Prämolaren und Molaren aufzubrechen.

284.501.32

Spatula17,5 cm

Improves the examination of the teeth by repositioning the tongue and cheeks. Features a lightweight handle.



Spatel 17,5 cm

Verbessert die Untersuchung der Zähne durch Neupositionierung von Zunge und Wangen. Verfügt über einen leichten Griff.

284.501.33

Rodent Mouth Spatulas
Nagetier Mund Spatel



284.501.34

Rodent Mouth Spatulas
Negetier Mund Spatel



284.501.35

Rabbit Dental Rasp
Kaninchen Zahnraspel



248.259.01

Cheek Dilator–X-Small 4,5cm

Suitable for very small mammals, for which the the small cheek dilator is too large.

Wangen Dilator extra klein 4,5 cm

Geeignet für sehr kleine Säugetiere, bei denen der kleine Wangen Dilator zu groß ist.



248.259.02

Cheek Dilator schmall 5,5 cm

Suitable for smaller mammals such as chinchillas and guinea pigs, enhancing inspection of the oral cavity

Wangen Dilator klein 5,5 cm

Geeignet für kleinere Säugetiere wie Chinchillas und Meerschweinchen, Verbesserung der Inspektion der Mundhöhle



248.259.03

Cheek Dilator–Large 8cm

Suitable for larger rabbits

Wangen Dilator groß 8 cm

Geeignet für größere Kaninchen





248.259.04

Cheek Dilator–Long Reach Curved 8 cm

The 40 mm long reach cheek dilator is ideal for using long diamond burs to reduce molar teeth. The radius of the paddle provides better access and visibility by pushing the cheeks away from the molars.

Wangen Dilator–langgestreckt gebogen 8 cm

Der 40-mm-Wangendilatator mit langer Reichweite ist ideal für die Verwendung langer Diamantbohrer zur Reduzierung der Molarenzähne. Der Radius des Paddels bietet besseren Zugang und bessere Sicht, da die Wangen von den Backenzähnen weggedrückt werden.

286.301.66

Creek Teeth Extractor 15 cm

Specially designed for the removal of premolar and molar teeth in rabbits. The forceps jaws are narrow and angled to improve access to the

to improve access to the molars

Creek Zahn-Extraktor 15 cm

Speziell entwickelt für die Entfernung von Prämolaren und Molaren Zähne bei Kaninchen. Die Zangenbacken sind schmal und abgewinkelt, um den Zugang zu den Backenzähnen zu verbessern



286.301.67

Rabbit Molar Cutters 18 cm

Ideal for trimming excessively long cheek teeth, which are then reduced in size with the long diamond bur. Prior length reduction by the molar cutter reduces wear and possible thermal injury to the tooth. Care must be taken to avoid tooth fractures and damage to soft tissue.

Kaninchen Backenzahn-Schneider 18 cm

Ideal zum Trimmen übermäßig langer Wangenzähne, die dann mit dem langen Diamantbohrer verkleinert werden. Durch vorherige Längen Kürzung durch den Molar Cutter wird der Verschleiß und möglich ethermische Verletzungen des Zahnes reduziert. Vorsicht ist geboten vor Zahnbrüchen und Schädigung des weichen Gewebes.



218.626.13

Rodent Mouth Gag

Lighter than comparable gags, reducing the weight on the jaw. Heavy duty with screw thread. Suitable for small and large rabbits. Designed by iM3.




218.626.10

Rodent Mouth Gag

Lightweight design with light spring action. Suitable for chinchillas, guinea pigs, rats and small rabbits. Improves the inspection of the oral cavity.

Rodent Mund Sperrer

Leichtes Design mit leichter Federwirkung. Geeignet für Chinchillas, Meerschweinchen, Ratten und kleine Kaninchen. Verbessert die Inspektion der Mundhöhle.

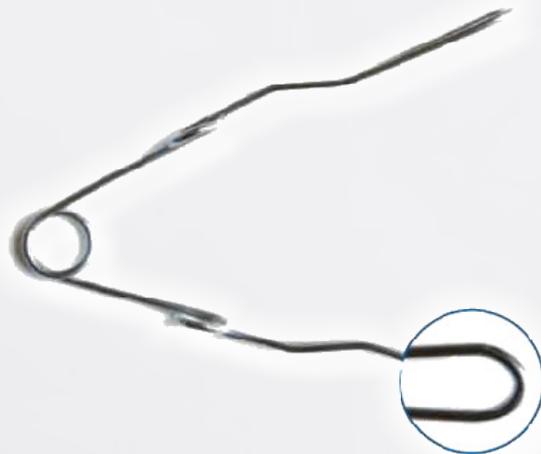

218.626.12

Rabbitmouth Gag

heavy 11cm


Kaninchen Mundsperrer

schwer 11cm



218.806.10

Wallace Knee Spreader 10cm

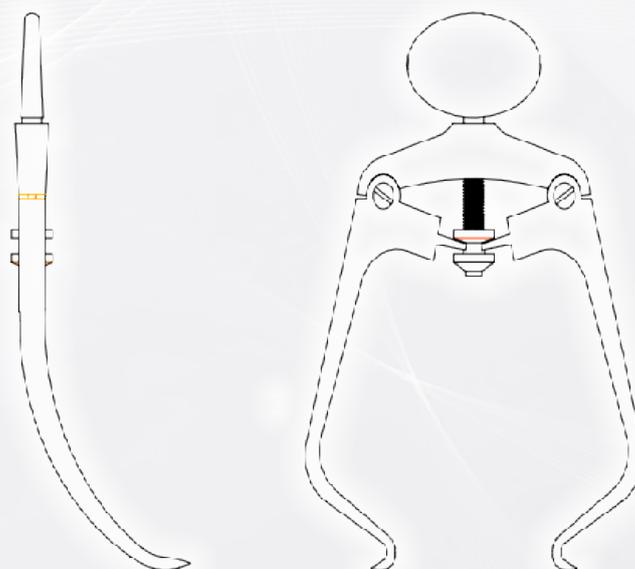

218.625.13

Rabbit Mouth Gag





274.241.16

claw shears heavy
for small animals
16 cm, with Locking lever

Klauenschere schwer
für kleine Tiere
16 cm, mit Verriegelungshebel

267.045.00

Teat Dilator



267.041.00

Teat Dilator With Screw



267.040.00

French Pattern Teat Knife



267.065.25

Milking tube

Cannula with bulbous end to take rubber tubing. Size 8,5cm, 2,5mm

Kanüle mit bauchigem Ende zur Aufnahme von Gummischläuchen. Größe 8,5cm, 2,5mm

267.065.30

Milking tube

Cannula with bulbous end to take rubber tubing. Size 8,5cm, 3mm

Kanüle mit bauchigem Ende zur Aufnahme von Gummischläuchen. Größe 8,5cm, 3mm

267.039.05

KNUDSON teat punch 5 mm

With two cuttings edges that comes together for removal of fibrous tissue.

Mit zwei zusammenlaufenden Schnittkanten zur Entfernung von Fasergewebe.





280.900.01

Universal Extraction Forceps 52,5 cm
rightholder movable

Universal Extraktions Zange 52,5 cm
rechter Backen beweglich



280.900.00

Universal Extraction Forceps 52,5 cm
rightholder movable
With threaded rod

Universal Extraktions Zange 52,5 cm
rechter Backen beweglich
Mit Gewindestange

283.999.10

Lingual Buccal short Head dental Pick

lingual and buccal application to lift the tissue around the molars, usually before extraction. Made of high quality stainless steel. Picking length with handle is 46 cm, which allows to work on all teeth in the horse's mouth. The length of the tip is 3.5 cm. Useful for lifting caps. With neoprene handle for extra grip even when wet.



Lingual Buccal kurzer Kopf dental Stocker

linguale und bukkale Anwendung zur Hebung des Gewebes um die Backenzähne, normalerweise vor der Extraktion. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl. Die Pflücklänge mit Griff beträgt 46 cm, wodurch alle Zähne im Maul des Pferdes bearbeitet werden können. Die Länge der Spitze beträgt 3,5 cm. Nützlich zum Anheben von Kappen. Mit Neoprengriff für zusätzlichen Halt auch bei Nässe

283.999.11

(Anterior posterior) Short head dental pick

For anterior and posterior use when lifting the tissue around the molars, usually before extraction. Useful for lifting caps. Made of high quality stainless steel. The length of the pick including the handle is 46 cm, so the work can be done directly behind the horse's mouth. The length of the tip is 3.5 cm. Useful for lifting caps. With neoprene handle for extra grip even when wet.




(AnteriorPosterior) kurzer Kopf dental Stocher

Für die anteriore und posteriore Anwendung beim Anheben des Gewebes um die Backenzähne, normalerweise vor der Extraktion. Nützlich zum Anheben von Kappen. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl. Die Länge des Plektrums einschließlich des Griffs beträgt 46 cm, sodass die Arbeit direkt hinter dem Maul des Pferdes ausgeführt werden kann. Die Länge der Spitze beträgt 3,5 cm. Nützlich zum Anheben von Kappen. Mit Neoprengriff für zusätzlichen Halt auch bei Nässe.

283.999.12


Needle Head Pick

The needle head is ideal for lifting the tissue around the molars or for lifting the caps. Made of high quality stainless steel, comes in a convenient waterproof carrying case. With an easy grip neoprene handle, this is a multi-functional precision toothpick. Can also help remove food from between teeth. Length of the handle with pick is 46cm. The length of the tip is 6cm.

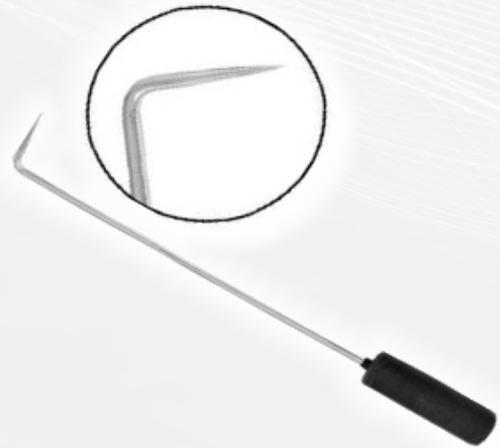

Nadelkopf-Picker

Der Nadelkopf ist ideal zum Anheben des Gewebes um die Backenzähne oder zum Anheben der Kappen. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, wird in einer praktischen wasserdichten Tragetasche geliefert. Mit einem griffigen Neoprengriff ist dies ein multifunktionaler Präzisions-Zahnstocher. Kann auch beim Entfernen von Lebensmitteln zwischen den Zähnen helfen. Länge des Griffs mit Pick ist 46cm. Die Länge der Spitze beträgt 6 cm.

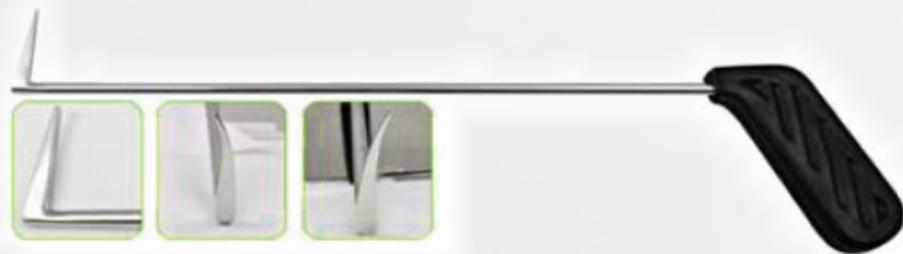

283.999.14

Ramazanperiodontal Elevater

Increasingly, surgical and dental remedial procedures are performed in the equine mouth under visual control with the patient standing and sedated. Successful removal of deep alveolar root fragments and teeth with fragile crowns requires a series of elevators that can be used to access all areas of the mouth and placed with precision adjacent to tooth tissue. These elevators allow the clinician to disrupt periodontal attachment of both intact and fractured molars prior to using forceps during the extraction process. The pistol grips allow them to be used with some force to press tooth tissue free of the alveolar wall, and insertion to a considerable depth within the cup facilitates complete extraction of teeth with even long reserve crowns.

Ramazanperiodischer Elevator

In zunehmendem Maße werden chirurgische und zahnärztliche Abhilfemaßnahmen im Pferdendemund unter visueller Kontrolle beim stehenden sedierten Patienten durchgeführt. Die erfolgreiche Entfernung von tiefen Alveolarwurzelfragmenten und Zähnen mit zerbrechlichen Zahnkronen erfordert eine Reihe von Aufzügen, die für den Zugang zu allen Bereichen des Mundes verwendet und mit Präzision neben Zahngewebe platziert werden können. Diese Aufzüge ermöglichen es dem Kliniker, die parodontale Befestigung sowohl intakter als auch gebrochener Backenzähne vor der Verwendung einer Zange während des Extraktionsprozesses zu unterbrechen. Die Pistolengriffe ermöglichen es, sie mit etwas Kraft einzusetzen, um Zahngewebe frei von der Alveolarwand zu pressen, und das Einführen in eine beträchtliche Tiefe innerhalb der Pfanne erleichtert die vollständige Extraktion von Zähnen mit selbst langen Reservekronen.

283.999.15

(Lingual Buccal) Long head, neoprenenhandle

Due to its lingual and buccal application, it is ideal for lifting tissues around molars or for lifting caps. Made of high quality stainless steel, comes in a convenient waterproof carrying case. With an easy grip neoprene handle, this is a multi-functional precision toothpick. Length of the handle with pick is 46cm. The length of the tip is 6cm.



(Lingual Buccal) Langer Kopf, Neoprengriff

Aufgrund seiner lingualen und bukkalen Anwendung eignet es sich ideal zum Anheben von Geweben um Backenzähne oder zum Anheben von Kappen. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, wird in einer praktischen wasserdichten Tragetasche geliefert. Mit einem griffigen Neoprengriff ist dies ein multifunktionaler Präzisions-Zahnstocher. Länge des Griffs mit Pick ist 46cm. Die Länge der Spitze beträgt 6 cm.

283.999.16

(Lateral posterior) Dental pick

With its anterior or posterior application, it is ideal for lifting tissues around molars or for lifting caps. Made of high quality stainless steel, comes in a convenient waterproof carrying case. With an easy grip neoprene handle, this is a multi-functional precision toothpick. Can also help remove food from between teeth. Length of the handle with pick is 46cm. The length of the tip is 6cm.



(seitlich posterial) Zahn-Picker

Mit seiner anterioren oder posterioren Anwendung eignet es sich ideal zum Anheben von Geweben um Backenzähne oder zum Anheben von Kappen. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, wird in einer praktischen wasserdichten Tragetasche geliefert. Mit einem griffigen Neoprengriff ist dies ein multifunktionaler Präzisions-Zahnstocher. Kann auch beim Entfernen von Lebensmitteln zwischen den Zähnen helfen. Länge des Griffs mit Pick ist 46cm. Die Länge der Spitze beträgt 6 cm.

283.999.01

Dental mirror 75mm Diameter, Straight

Non-magnetically attached, straight dental mirror with larger head and French front surface for 100% accurate reflection. Larger mirror surface with French front provides 100% accurate reflection of dental images on a larger viewing area. Made of high quality stainless steel

Zahnspiegel 75mm Durchmesser, gerade

Nicht magnetisch befestigter, gerader Zahnspiegel mit größerem Kopf und französischer Frontoberfläche für 100% genaue Reflexion. Die größere Spiegelfläche mit französischer Front sorgt für eine 100 % genaue Darstellung von Zahnbildern auf einer größeren Betrachtungsfläche. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl



283.999.02

75 mm Diameter 25d inclined

Non-magnetically fixed, 25 degree angled head, toothed mirror with French Fronted surface for 100% accurate reflection. French front provides 100% accurate image reflection. Angled head allows practitioner to see different views of teeth. Made of high quality stainless steel.

75 mm Durchmesser 25°schräg

Nicht magnetisch fixierter, 25 Grad abgewinkelter Kopf, Zahnspiegel mit French Fronted-Oberfläche für 100% genaue Reflexion. Französische Front sorgt für 100% genaue Bildreflexion. Der abgewinkelte Kopf ermöglicht es dem Praktiker, verschiedene Ansichten der Zähne zu sehen. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl.

283.999.04

75 mm Diameter 25d inclined

Non-magnetically fixed, 25 degree angled head, toothed mirror with French Fronted surface for 100% accurate reflection. French front provides 100% accurate image reflection. Angled head allows practitioner to see different views of teeth. Made of high quality stainless steel.

75 mm Durchmesser 25°schräg

Nicht magnetisch fixierter, 25 Grad abgewinkelter Kopf, Zahnspiegel mit French Fronted-Oberfläche für 100% genaue Reflexion. Französische Front sorgt für 100% genaue Bildreflexion. Der abgewinkelte Kopf ermöglicht es dem Praktiker, verschiedene Ansichten der Zähne zu sehen. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl.


283.999.03

50 mm Diameter, straight

Non-magnetic solid straight shaft, dental mirror with French Fronted surface for 100% accurate reflection. French Front provides 100% accurate imaging of the image. Made of high quality stainless steel

50 mm Durchmesser, gerade

Nichtmagnetischer fester, gerader Schaft, Dentalspiegel mit French Fronted-Oberfläche für 100% genaue Reflexion. French Front bietet eine 100% genaue Abbildung des Bildes. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl

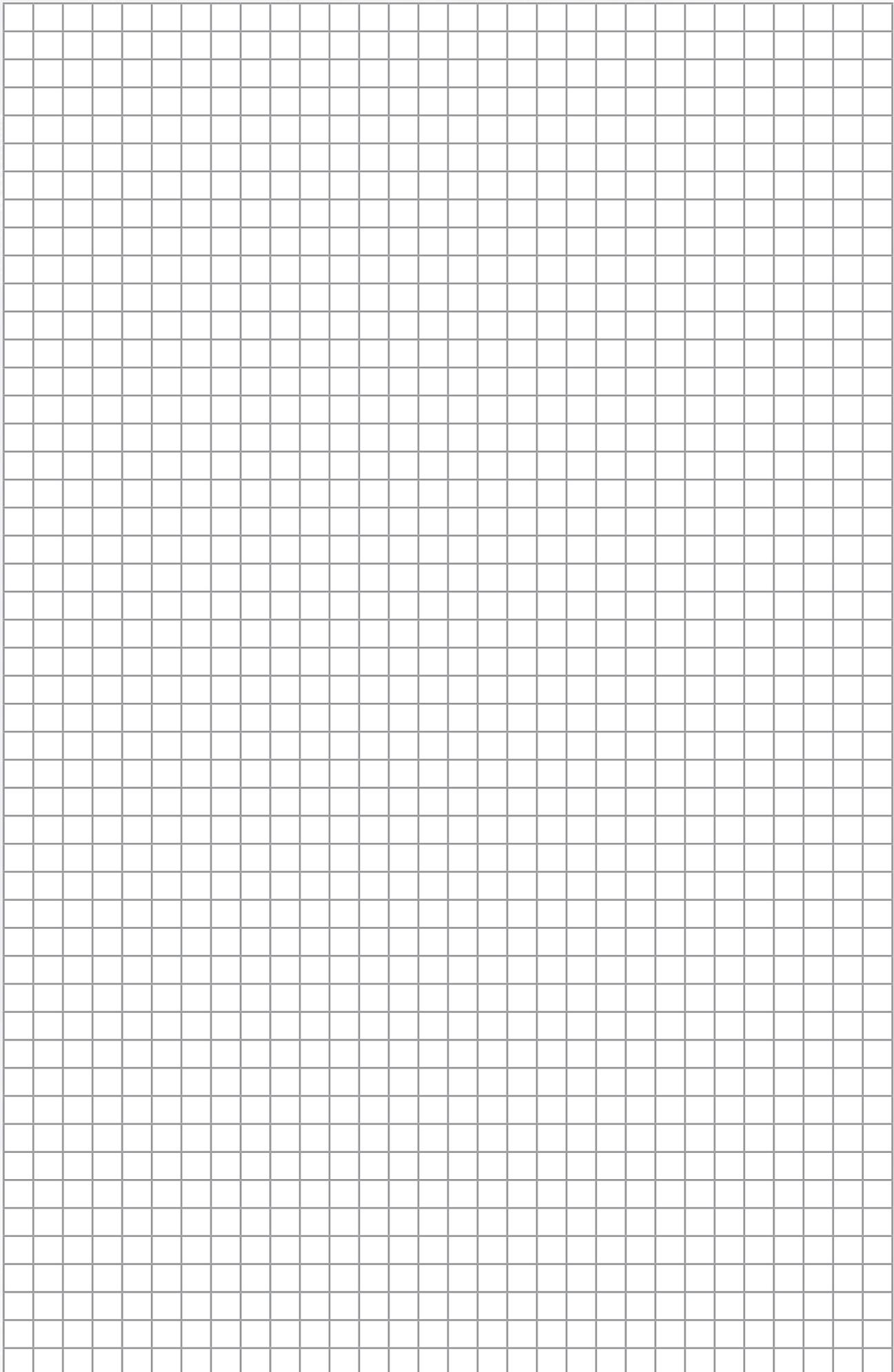



VeHu-Medical GmbH
MRitter & Sohn GmbH
Dr. Karl Storz Str. 25
D-78532 Tuttlingen

Tel. +49(7461) 163311
Fax.+49(7461) 163312
info@vehu.de
www.vehu.de

